


Produktinfo, bruksanvisning, monteringsanvisning,
teknisk dokumentation,
rekonditioneringsanvisning, brukarinformation,
förskrivarinformation och skrotningsanvisning.

NimaCare

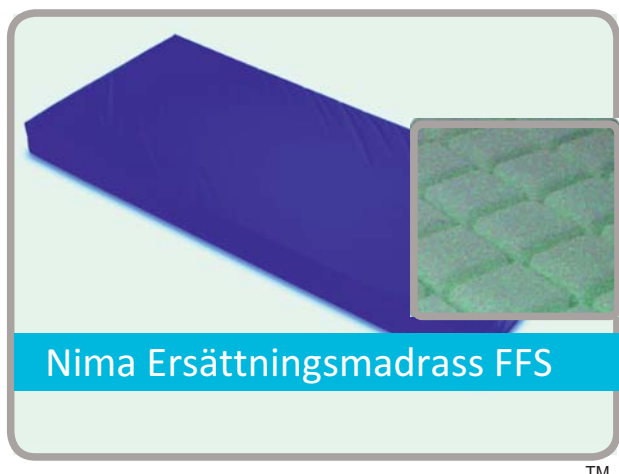

Nima Ersättningsmadrass med *free flow system*

är vår madrass för brukare med risk för liggsår både i hemmet och på institution.

Nima Free flow system Ökar madrassens värmeavledande förmåga om detta vänds uppåt. Madrassen är 14 cm hög och kan därför tillverkas i mjukt skum utan att brukaren bottnar igenom. Till madrassen följer ett hygienöverdrag. Överdraget är ångpermeabelt och har dragkedja på 3 kanter.

Madrassen kan användas separat eller tillsammans med valfri toppmadrass.

Free flow systemTM Nima Ersättningsmadrass FFS

Trycksårsförebyggande ersättningsmadrass. Används upp till sårgrad 2. Kallskumskärna av hög kvalitet med Nima free flow system toppskikt. Ångpermeabelt hygienöverdrag med handtag på långsidorna

Fakta

Basfakta

Används som trycksårsförebyggande madrass upp till grad 2. Lägg direkt på sängbotten.

Material

Kallskumskärna med formskuret toppskikt

Överdrag i polyuretanbelagd polyester

Tvättråd

Basen kan ytdeinficeras med på marknaden förekommande medel.

Överdraget tvättas i maskin 90 grader och kan torktumlas.

Brukarvikt

0-150 kg.

Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande / Skötselinstruktioner/Destrueringsinstruktion

1. Kontrollera att storleken på madrassen är korrekt, det sitter en etikett på madrassen med information om madrass typ och storlek
2. Skär upp tejp som håller madrassen ihoprullad, skär sedan upp plasten och ta ur madrassen.
3. Öppna madrassens överdrag lite - ca 20 cm räcker för att luft skall kunna komma in och madrassen fyllas. När madrassen är helt fylld, efter ca 10 min så kan dragkedjan stängas.
4. Bestäm om madrassen skall ligga med kuber upp. Den är tänkt så men det är inte fel att lägga den med kuberna ner. Dock så bör överdraget träs på på andra hållet på grund av dragkedjans droppkant. Om droppkanten inte är av betydelse så kan man vända madrassen utan att ändra överdraget.

4. Rengöring och skötsel

Överdraget kan spritas av, eller torkas av med vanligt förekommande medel, eller tvättas i maskin på 90 grader och torktumlas. Madrassbasen suger åt sig vatten så den kan ytdeinficeras men måste då få lufttorka.

5. Destruering. Uttjänt madrass sorteras under brännbart